

První polyvalentní cross-link kyselina

X-HA³[®]



TROJÍ INDIKACE:
STŘEDNÍ VRÁSKY – HLUBOKÉ VRÁSKY - RTY



LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

IF

X-HA³

30 ANS DE MEDECINE
ESTHETIQUE

LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

2 x 1ml

COMPLEMENT - rides moyennes, profondes et lèvres
Acide hyaluronique réticulé

2 AMPOLLES LIPN-LOCK PRE-BOUILLIES 1ML - 4 AMPOLLES DE TRIPLE X-HA 1ML

FILLER - medium to deep wrinkles and lips

Cross-linked hyaluronic acid

2 x 1ML PREBULLED LIPN-LOCK HYALURONS - 4 AMPOLLES 1ML

CE
0297

X-HA³[®]

První polyvalentní cross-link kyselina hyaluronová k dermální výplni

K OKAMŽITÝM, HARMONICKÝM A DLOUHODOBÝM VÝSLEDKŮM

Exkluzivní složení

UPRAVENÝ PRO RŮZNÉ HLOUBKY APLIKACE

- Jednofázový a vstřebatelný implantát bez částic
- Optimální koncentrace: 23mg/ml cross-link = křížem zesíťované kyseliny hyaluronové a volné kyseliny hyaluronové.
- Vysoká molekulární hmotnost: 2,5 milionu Daltonů
- Zesíťování s BDDE kvůli maximálnímu účinku a snášenlivosti
- Získán biofermentací neživočišného původu
- Vysoce čištěný v zájmu dokonalé biokompatibility

Široké indikace

PRO VŠECHNY PROJEVY OCHABLOSTI KŮŽE SPOJENÉ SE STÁRNUTÍM

- STŘEDNÍ VRÁSKY
- HLUBOKÉ VRÁSKY
- RTY: KONTURY A OBJEM
- Nosoretní rýhy
- Svislé vrásky od koutků úst „Marionette“
- Kontury obličeje
- Vrásky kolem úst
- Lícni kosti
- Spodní oční víčka
- Vrásky mezi obočím
- Kontura rtů
- Objem rtů

Balení

- 2 předplněné sterilní stříkačky o objemu 1 ml
- 4 jehly 27G 1/2
- 4 etikety s označením původu

DYNAMICKÁ DERMÁLNÍ

X-HA³® JE VÝSLEDKEM SPOLEČNÉHO VÝZKUMU FILORGY, RENOMOVANÉHO ODBORNÍKA V OBLASTI OMLAZOVÁNÍ A EXPERTNÍ EVROPSKÉ LABORATOŘE NA KYSELINU HYALURONOVOU V REVMA TOLOGII.

Z TOHOTO PARTNERSTVÍ VZEŠEL NOVÝ POSTUP PŘI DERMÁLNÍCH VÝPLNÍCH, TZV. „DYNAMICKÁ MODELACE“, KTERÁ UMOŽŇUJE VYTVOŘENÍ IDEÁLNÍ VÝPLNĚ PŘIZPŮSOBENÉ PRO VŠECHNY HLOUBKY.


DYNAMICKÁ MODELACE

NOVÝ POSTUP PŘI APLIKACI DERMÁLNÍCH VÝPLNÍ

POLYVALENTNÍ CHARAKTERISTIKA JE VÝSLEDKEM KOMBINACE 3 VLASTNOSTÍ:

ZVÝŠENÍ OBJEMU

Již malé množství X-HA³® postačuje k tomu, aby byl vytvořen objem schopný nadzdvihnout tkáň a tím vyplnit střední a hluboké vrásky. Tato schopnost vytvářet objem je umožněna jedinečnou viskoelasticitou, kterou má látka díky své výrazné molekulární hmotnosti v kombinaci s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a také díky upravené struktuře cross-link.

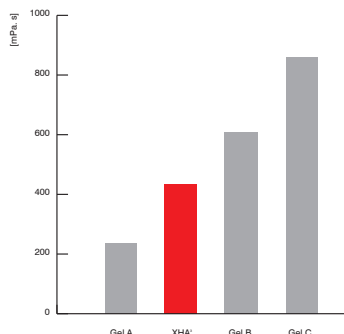


viskozita v 0.1s^{-1}

MODELACE

Gel X-HA³® lze po vstříknutí tvarovat, modelovat a snadno rozmístit ve tkáních, takže obnoví harmonické rysy tváře. Tato mimořádná modelační schopnost může být využita při ošetření středních prohlubní, přičemž zůstane zachován přirozený dojem.

HOMOGENITA

Gel X-HA³® má díky své výjimečné homogenitě rovnoměrnou konzistenci a jednotnou hustotu, a proto je možné jej přesně a pravidelně vstříkovat a dosáhnout přitom přirozených výsledků.

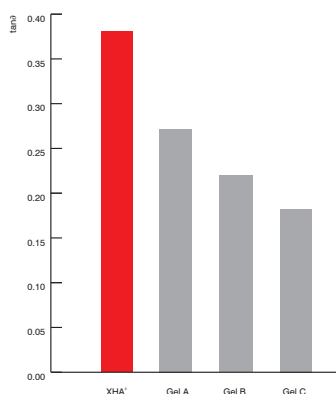


$\text{Tan } \delta : \frac{\text{viskozita}}{\text{elasticitá}}$

VÝPLŇ PŘIZPŮSOBENA PRO VŠECHNY TKÁŇĚ

4 výhody pro dokonalou korekci


1 adaptovaná viskoelastická

PRO DYNAMICKÉ DERMÁLNÍ VÝPLNĚ. Díky své jedinečné viskozitě může být X-HA^{3®} vstříkována do různých hloubek dermis, aniž by vytvořila bulku. Umožňuje tedy odstranění středních vrásek (vstříkem do středních vrstev) a hlubokých vrásek (vstříkem do hlubokých vrstev dermis).

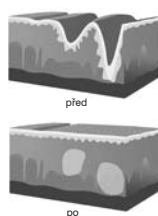

2 perfektní homogenita

Během výroby X-HA^{3®} se věnuje zvláštní pozornost její homogenizaci: byly přidány dvě doplňující fáze homogenizace, aby bylo dosaženo výroby jednoho z nejhomogennějších gelů na trhu. Tato výjimečná homogenita umožňuje jak bezpečnou a kontrolovanou injekční aplikaci, tak vede k dosažení přirozeného a harmonického výsledku, jenž je zaručen u každé stříkačky.

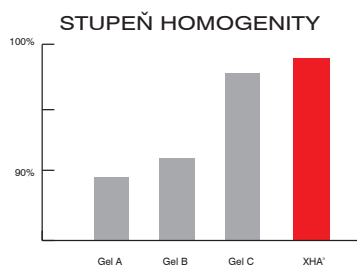


3 Optimální přetrvávání

Výsledky jedné aplikace X-HA^{3®} jsou viditelné okamžitě a přetrvávají 9 až 12 měsíců.

4 maximální čistota

Množství proteinů obsažených v X-HA^{3®} je jedno z nejnižších na trhu. Hladina bakteriálních endotoxinů je mnohem nižší, než požaduje evropský lékopis. X-HA^{3®} tedy omezuje rizika reakcí jakými jsou přecitlivělost, záněty či sekundární reakce a nabízí dokonalou biokompatibilitu.

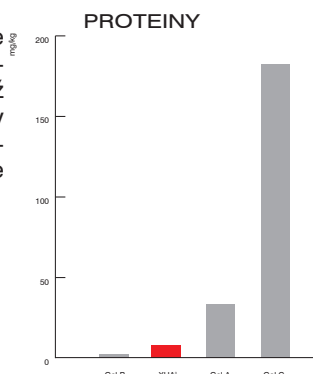

GLABELLA - VRÁSKY MEZI OBOČÍM

LÍCNÍ KOSTI

NOSORETNÍ RÝHY – NASOLABIÁLNÍ RÝHY


VRÁSKY KOLEM ÚST

OBJEM RTŮ

SVISLÉ („MARIONETTE“) VRÁSKY OD KOUTKŮ ÚST

KONTURY RTŮ

KONTURY OBLIČEJE

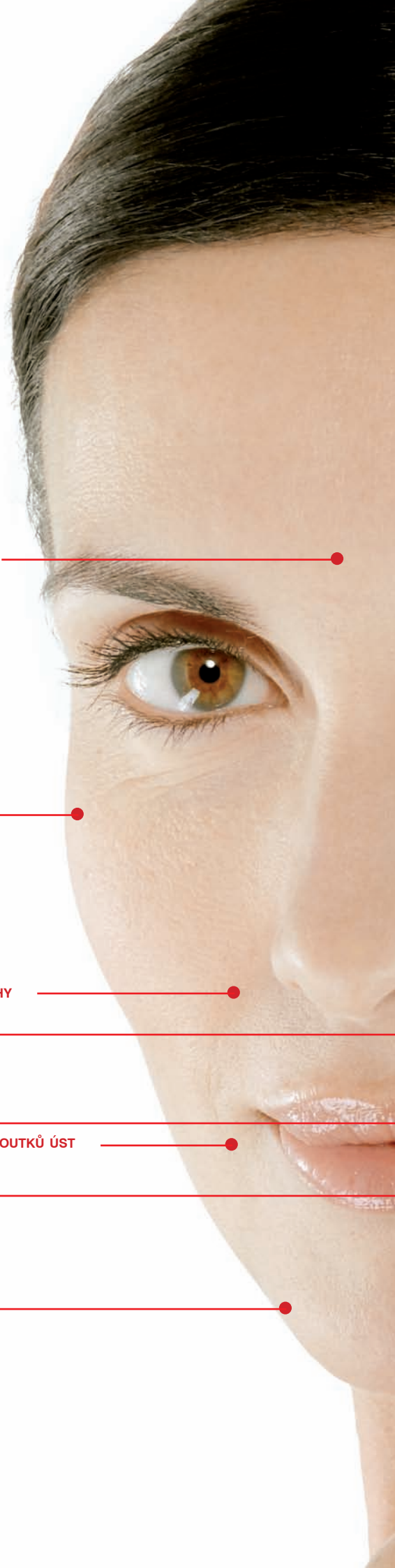



TECHNIKY A PROTOKOL

DERMÁLNÍ VÝPLNĚ MUSÍ BÝT APLIKOVÁNY ZA POMOCI NÁSLEDUJÍCÍCH SPECIFICKÝCH INJEKČNÍCH TECHNIK V ZÁVISLOSTI NA TYPU OŠETŘOVANÉ VRÁSKY A PODLE POŽADOVANÉHO VÝSLEDKU. KAŽDÉ OŠETŘENÍ INJEKČÍ X-HA^{3®} MŮŽE BÝT DOPLNĚNO JEŠTĚ INJEKČÍ NCTF 135[®] S CÍLEM ZPEVNĚNÍ TKÁNÍ BIOLOGICKÝM A PŘIROZENÝM ZPŮSOBEM V PRŮBĚHU RESORPCE X-HA^{3®}.

Lineární technika retro-aplikace




Technika je nejčastěji používaná na střední vrásky a na rty. Spočívá v zavedení celé jehly do vrásky a při následném jemném vytahování jehly je aplikována kyselina hyaluronová X-HA^{3®}. Otvor jehly může být namířen dolů v případě injekcí do střední a hluboké dermis (škáry) a směrem nahoru při aplikaci do povrchových vrstev.

Technika sériových vpichů




Doporučována při vyplňování mělkých vrásek. Technika spočívá v opakovaných aplikacích podél vrásky. Díky homogenitě a modelačním schopnostem X-HA^{3®} dojde po důkladné masáži k tomu, že se malé dávky pospojují a vytvoří souvislou linku.

Vějířová technika

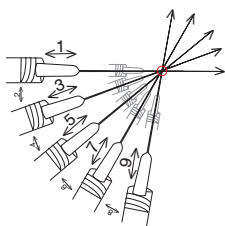

Je doporučována pro případy, kdy má být při zákroku dosaženo zvětšení objemu v širší oblasti bez opakovaných vpichů jehlou. Technika spočívá v zavedení jehly do okraje oblasti, která má být ošetřena. Dochází k pomalému vstříkávání X-HA^{3®}, při kterém lékař jehlu pomalu vytahuje, avšak nevytáhne ji úplně. Poté je přesměrována pod jiným úhlem a je zopakována aplikace další dávky. Opakováním tohoto postupu vznikne vějířovitý vzorec.

Mřížková technika

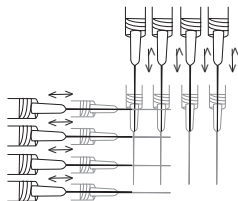

V případě výraznější úpravy objemu je možné přistoupit k střídavě na sebe kolmé retro-aplikaci, takže vzniká tvar mřížky. Tento typ injekcí se doporučuje pro výplně větších oblastí, například tváří.

Kontraindikace:

- Autoimunitní onemocnění a imunoterapeutická léčba
- Anamnéza alergie a přecitlivělost na kyselinu hyaluronovou
- Těhotné nebo kojící ženy
- Opar, akné, ekzém nebo jakékoli zánětlivé či infekční léze
- Anamnéza aplikace trvalých implantátů v ošetřované oblasti

ERGONOMIE & BEZPEČNOST




Snadné použití, bezpečná stříkačka

PRO POHODLNÝ, PŘESNÝ POHYB

- Velká, ergonomická rukojeť = grip – rotace 360°
- Reverzní stupnice pro okamžité zjištění vstříknutého objemu
- Užití jehly Luer-lock předchází riziku uvolnění ze stříkačky
- 1 ml ve stříkačce, vhodné pro harmonickou a přirozenou úpravu
- Ergonomická, krátká skleněná stříkačka

Regulovaný vstřik

VELMI HOMOGENNÍ SÍLA PŘI APLIKACI

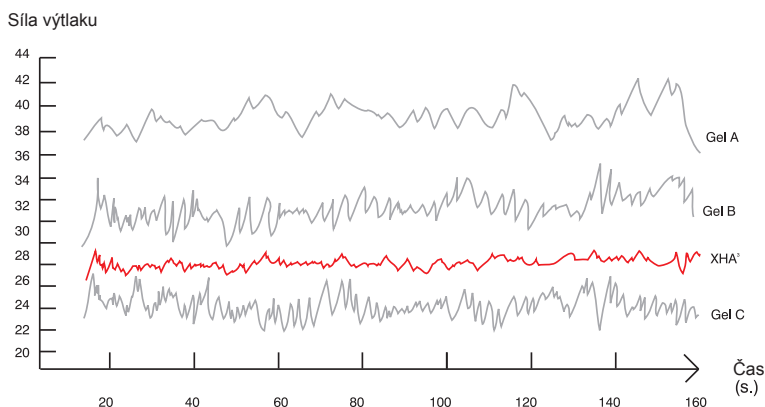

Gel A: jednofázový s 25 mg/g zesíťované kyseliny hyaluronové

Gel B: jednofázový s 24 mg/g zesíťované kyseliny hyaluronové

Gel C: jednofázový s 22,5 mg/g zesíťované kyseliny hyaluronové

FILOGA

Komplexní anti-aging řešení

Anti-aging specialista v oblasti injekční terapie v posledních 30 letech

- 30 let praxe v praktické aplikaci.
- Certifikát ISO 13485 potvrzuje dokonalý dohled nad výrobou a tím vysokou bezpečnost výrobků.
- CE značka produktů s označením CE0297.
- Požadavky na kvalitu vyhovují Evropským lékařským standardům.
- Aktivní výzkum v oblasti vývoje poskytuje inovativní a bezpečná řešení lékařům i jejich pacientům.

Partnerství poskytované lékařům

- Lékařské vyškolení v nejnovějších omlazovacích technikách pod vedením mezinárodních expertů
- Kompletní vybavení pro aplikaci
- Klinické studie prokazující účinnost výrobků
- Efektivní, zodpovědný zákaznický servis

Komplexní zvládnutí projevů stárnutí



■ **OMLAZOVACÍ MEZOTERAPIE: NCTF135® a NCTF135HA®**

Mnohostranný revitalizační roztok z 55 + 1 ingredience.

EC značka je dalším potvrzením anti-aging efektivity.

Ošetřeno více než jeden milión pacientů ve 34 zemích.



■ **POVRCHOVÝ PEELING: Glykopeel® 50%, 70% a 70% MAX**

Celkový omlazovací peeling bez potřeby vzdát se dočasně společenského života s těmito indikacemi: vrásky, pigmentové skvrny, lesklá mastná pleť, akné a další kožní nedostatky.

18 ingrediencí včetně kyseliny glykolové s okamžitým a dlouhodobým působením.

Tím, že lékař kombinuje tato různá řešení, uplatňuje celkový přístup k potřebám pacienta. Nevolí tedy jen částečné řešení, které by se soustředilo jen na některé znaky stárnutí.



30 LET ESTETICKÉ MEDICÍNY

Od konce 70. let shromáždily laboratoře Filorga - Laboratoires Filorga - tým specialistů, který odstartoval moderní výzkumný program zabývající se stárnutím kůže. Cílem těchto výzkumů bylo pochopení procesů stárnutí a lepší boj proti nim.

Jak? Prostřednictvím komplexní terapie, která kombinuje omlazovací lékařské techniky a nechává je působit ve vzájemné součinnosti. Tím efektivně bojuje proti vráskám, ale také proti nedostatečné pevnosti či zářivosti pleti. **Specialisté Laboratoires Filorga, skuteční průkopníci v tomto oboru, využili výsledky svého výzkumu a na jejich základě v 90. letech vyvinuli biologické produkty, které jsou schopné zbrzdit či zastavit příznaky stárnutí:** jedná se o anti-aging mezoterapii se známým polyrevitalizačním komplexem NCTF®, glykolový peeling GlyKopeel® a dermální výplně kyseliny hyaluronové X-HA3®. Poté, co byly produkty Laboratoires Filorga přijaty dermatology, lékaři estetické medicíny a plastickými chirurgy ve více než 50 zemích do rutinního užívání, staly se uznávaným expertem na stárnutí kůže. **Na základě řady inovací se obchodní značka FILORGA stala vedoucí firmou na trhu s anti-aging medicínou a dermatokosmetikou.**

V České a Slovenské republice se exkluzivním dodavatelem výrobků Laboratoires Filorga stala společnost medical beauty s.r.o. Úkolem této společnosti je umožnit užívání širokého portfolia produktů určených jak pro domácí použití, tak pro profesionální salóny a estetické kliniky. Estetická ošetření moderní dermatologie zahrnují aplikaci botulotoxinu, výplní, peelingu či mezoterapie. **Proto Vám nabízíme nejen prodej, ale i trénink pro zdravotnické profesionály v prostorách Kliniky estetiky a medicíny proti stárnutí medical beauty nebo přímo na Vašem pracovišti.**

medical beauty
health, beauty and anti-aging solutions



V ČR a SR dodává:

medical beauty s.r.o.

nám. generála Píky 27, CZ - 326 00 Plzeň

prodej@medicalbeauty.cz

tel.: +420 377 244 377

mobil: +420 777 334 007

LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

www.filorga.cz - www.filorga.sk